

MANUAL DE USUARIO

MNPG77-02 Edición 09/01/20

Colchón de magnetoterapia

OSTEOMAT

I.A.C.E.R. Srl

www.itechmedicaldivision.com

I.A.C.E.R. Srl

Via S. Pertini 24/A – 30030

Martellago (VE) ITALY

Tel. +39 041 5401356 – Fax +39 041 5402684

e-mail: iacer@iacer.it

<http://www.itechmedicaldivision.com>

Sumario..... 3

Introducción 4

Información técnica..... 5

Características técnicas:..... 5

Método de uso 6

Instrucciones para usar Osteomat..... 6

Cuidado de Osteomat..... 6

Limpieza Osteomat 6

Asistencia..... 6

Garantía 7

Introducción

El tapete **OSTEOMAT** es el nuevo tapete para tratamientos de magnetoterapia de baja frecuencia. Este colchón nació de la necesidad de tratar simultáneamente varias partes del cuerpo y por tiempos de terapia prolongados.

La efectividad de la magnetoterapia en la recuperación de las condiciones fisiológicas de equilibrio de las estructuras celulares es ahora conocida. Los campos magnéticos pulsados, de hecho, actúan sobre las membranas celulares favoreciendo el intercambio iónico entre los dos lados de la membrana. Esto conduce a restaurar el potencial transmembrana correcto, que es esencial para garantizar el suministro de nutrientes dentro de la célula.

A nivel de órganos y estructuras anatómicas, estos efectos se traducen en analgesia, reducción de la inflamación, estímulo para la reabsorción de edemas.

Además, la magnetoterapia de baja frecuencia es particularmente adecuada para estimular la regeneración de fracturas y ralentizar el proceso de disminución de la densidad ósea provocada por la **osteoporosis**.

La osteoporosis, que ahora se ha convertido en un fenómeno social creciente, implica la necesidad de intervenir en la arquitectura esquelética en su conjunto. En este sentido, la posibilidad de utilizar una estera permite intervenir sistemáticamente en todo el organismo.

El nuevo colchón **OSTEOMAT** es, por lo tanto, la herramienta ideal para tratar múltiples segmentos del cuerpo en una sola sesión gracias a su gran facilidad de uso y extrema flexibilidad.



Características técnicas:


- Tamaño completo del colchón: 160x65x2 cm;
- 4 sectores activos;
- 2 cables de conexión;
- Compatible con los modelos MAG2000, MAG2000 PLUS y LaMagneto;
- Funda de colchón TNT (2 piezas).

El colchón Osteomat está compuesto por 4 sectores activos, que contienen 2 solenoides cada uno, para un total de 8.

Atención: se recomienda aplicar la cubierta TNT sobre el colchón antes de usarlo.

La configuración de Osteomat ha sido diseñada para estimular aquellas áreas del cuerpo (hombros, columna vertebral, pelvis) que se ven más afectadas por una reducción en la masa ósea, un síntoma típico de la osteoporosis.

Consulte la siguiente imagen para ver la disposición de los solenoides (indicados por los círculos) dentro del Osteomat.

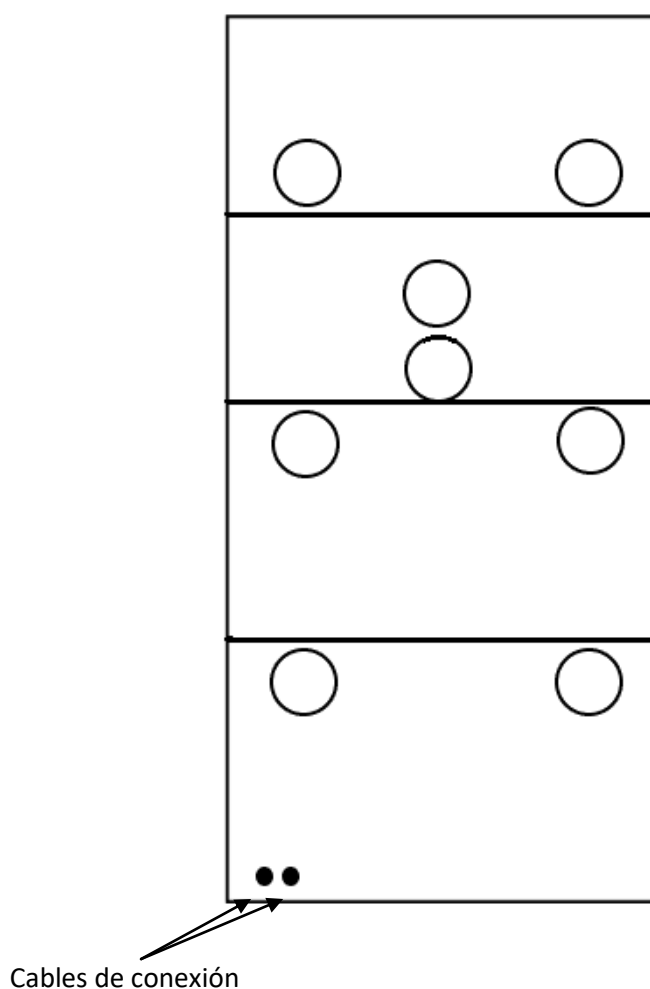

Istrucciones para usar Osteomat

Para usar el colchón Osteomat, simplemente siga los siguientes pasos simples:

- 1. Conecte los dos cables de la alfombrilla respectivamente a los dos enchufes CH1 y CH2 ubicados en el panel en la parte superior del dispositivo en uso (MAG2000, MAG2000 PLUS o dispositivo de la familia LaMagneto);*
- 2. Inicie el programa elegido siguiendo las instrucciones apropiadas en el manual del usuario del dispositivo;*
- 3. Colóquese sobre el colchón, prestando atención para acostarse sobre el lado indicado como terapéutico por la etiqueta apropiada.*

Limpieza Osteomat

Para la limpieza de Osteomat, se recomienda desconectar el colchón del dispositivo antes de realizar cualquier operación. Limpie la tela con un paño humedecido con agua corriente y jabón neutro y espere a que se seque por completo antes de volver a usar el colchón para una sesión terapéutica.

Asistencia

El fabricante es el único exclusivista para intervenciones de asistencia técnica en el colchón terapéutico Osteomat. Para cualquier intervención de asistencia técnica, contacte a:


I.A.C.E.R. S.r.l.

Via S. Pertini, 24/a • 30030 Martellago (VE)

Tel. 041.5401356 • Fax 041.5402684

Garantía

Osteomat está cubierto por una garantía de 2 años a partir de la fecha de compra. La garantía caduca en caso de manipulación, negligencia y uso inapropiado del colchón y en caso de intervención sobre el mismo por personal no autorizado por el fabricante o distribuidor autorizado.

OSTEOMAT. Todos los derechos están reservados. OSTEOMAT y el logotipo  son propiedad exclusiva de I.A.C.E.R. Srl y están registrados



I.A.C.E.R. Srl

Via S. Pertini 24/A - 30030 Martellago (VE) - Italia / Italy

Tel.: (+39) 041/5401356 - Fax: (+39) 041/5402684

Email: iacer@iacer.it - PEC: iacer@pec.it - Web: www.itechmedicaldivision.com

Cod. Fisc. / P.IVA / Vat Number: IT00185480274 - Codice SDI: SUBM70N

R.E.A.: VE N. 120250 - M. VE001767 - Capitale Sociale / Share Capital: € 110.000,00 i.v.

