

MANUAL DE USO

MNPG380-03 Edición 04/07/2022

FTI1000

Aplicador de banda con antena radiante

I.A.C.E.R. Srl

www.itechmedicaldivision.com

Introducción

El dispositivo **FTI1000** es un aplicador con antena radiante para magnetoterapia de alta frecuencia.

Se adapta fácilmente a cualquier zona del cuerpo gracias a la presencia del elástico terapéutico.

El dispositivo está clasificado como clase I, de acuerdo con la regla 1 (4.1) prevista en el anexo VIII del Reglamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo y del Consejo del 5 de abril de 2017 sobre productos sanitarios.

UDI-DI básico: 8019781PEMFHFASME

UDI-DI: 08019781113405

Información técnica

Características técnicas:


- Tamaño del aplicador: 37x9 cm + elástico;
- Longitud del cable: 158 cm;
- Antena radiante;
- 1 cable de conexión;
- compatible exclusivamente con el modelo MAG1000.

Etiquetado




Etiqueta 1

Etiqueta 1

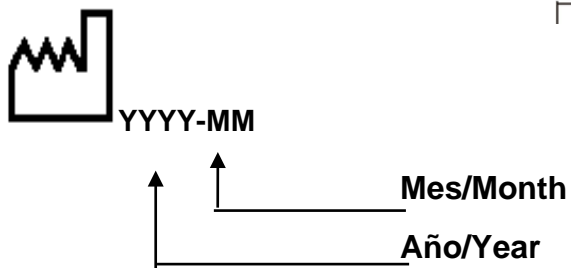



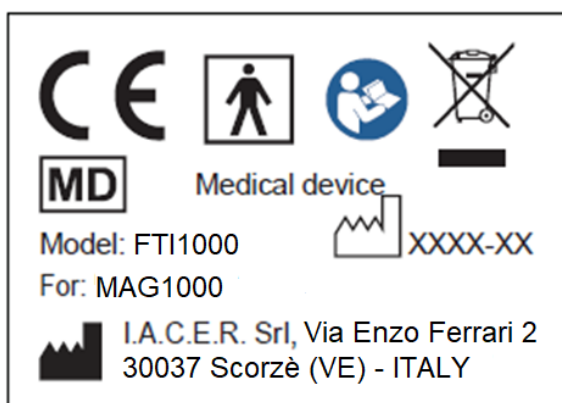


Etiqueta 2 – (Etiqueta cable)



Simbolos:

Símbolo	Significado
	Logotipo del fabricante.
	De acuerdo con el Reglamento (UE) núm. 2017/745
	Datos del Fabricante.

Símbolo	Significado
	Fecha de fabricación (AAAA-MM).
	Siga las instrucciones de uso.
	Producto sanitario.
	Directiva RAEE para la eliminación de residuos electrónicos.
	Parte aplicada tipo BF.

Transporte y almacenamiento

No se requieren cuidados particulares durante el transporte. En cuanto al almacenamiento, el equipo está protegido hasta las siguientes condiciones ambientales:

temperatura ambiente de +5 a + 40 °C

humedad relativa del 30 al 80%

Modo de empleo

Instrucciones de uso de FTI1000

Siga las instrucciones del Manual de Uso que acompaña al dispositivo.

Siga las advertencias expuestas en los manuales de uso del producto MAG1000.

Cuidado de FTI1000


Limpieza de FTI1000

Para la limpieza de FTI1000 se recomienda desconectar el aplicador del dispositivo antes de realizar cualquier operación. Limpie la tela con un paño humedecido con una solución de

agua y alcohol (solución al 20%) y espere que se seque por completo antes de volver a utilizar el aplicador para una sesión terapéutica.

Información para la eliminación



El producto está sujeto a la normativa RAEE (presente en la etiqueta con el símbolo ) sobre recogida selectiva: para desechar el producto, use áreas especiales equipadas para la recogida de material electrónico contactando con las autoridades competentes de su país o directamente con el fabricante.

Mantenimiento y asistencia

El dispositivo no requiere ningún mantenimiento ordinario particular. Póngase en contacto con el fabricante para que se compruebe la funcionalidad del dispositivo cada dos años. El fabricante es el agente exclusivo para intervenciones de asistencia técnica en el aplicador FTI1000. Para cualquier intervención de asistencia técnica, comuníquese con:

I.A.C.E.R. S.r.l.

Via Enzo Ferrari, 2 • 30037 Scorzè (VE)

Tel. 041.5401356 • Fax 041.5402684

Garantía

FTI1000 está cubierto por una garantía de 2 años a partir de la fecha de compra. La garantía queda anulada en caso de manipulación, falta de cuidado y uso inadecuado del aplicador, y en caso de intervención en el mismo por parte de personal no autorizado por el fabricante o por el distribuidor autorizado.

Notificación de incidentes

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2017/745, el fabricante señalará al usuario la necesidad de notificar cualquier incidente grave que se haya producido en relación con el producto.

- La notificación deberá dirigirse al fabricante del producto:

I.A.C.E.R. Srl

Via Enzo Ferrari 2 – 30037

Scorzè (VE) ITALY

Tel. +39 041 5401356 – Fax +39 041 5402684

e-mail: iacer@iacer.it



I.A.C.E.R. S.r.l.

Via Enzo Ferrari 2 - 30037, Scorzè (VE) – Italy

Tel.: (+39) 041 540 13 56 | Email: iacer@iacer.it

www.itechmedicaldivision.com

Share Capital: € 1.000.000 fully paid-up

Tax Code / VAT Number: IT 00185480274

Certified email: iacer@pec.it | SDI: SUBM70N