

NOTICE D'UTILISATION

MNPG381-03 *Édition 04/07/2022*

FTI1000

Applicateur-sangle

avec antenne

rayonnante

I.A.C.E.R. Srl

www.itechmedicaldivision.com

Introduction

L'appareil **FTI1000** est un applicateur avec antenne rayonnante pour la magnétothérapie à haute fréquence.

Il s'adapte facilement à n'importe quelle partie du corps grâce à la présence de l'élastique thérapeutique.

Les dispositifs sont classés dans la classe I, conformément à la règle 1 (4.1) visée à l'annexe VIII du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux.

UDI-DI de base : 8019781PEMFHFASME

F3S2000 UDI-DI : 08019781113405

Informations techniques

Caractéristiques techniques :


- Dimensions de l'applicateur: 37x9 cm + élastique;
- Longueur du câble: 158 cm;
- antenne rayonnante;
- 1 câble de connexion;
- compatible uniquement avec le modèle MAG1000.

Étiquette


Étiquette 1 / Label 1



Étiquette 1 - Label 1

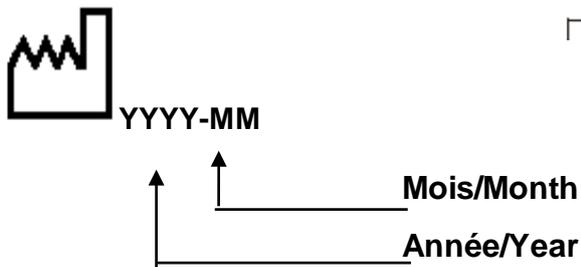

Étiquette câble :

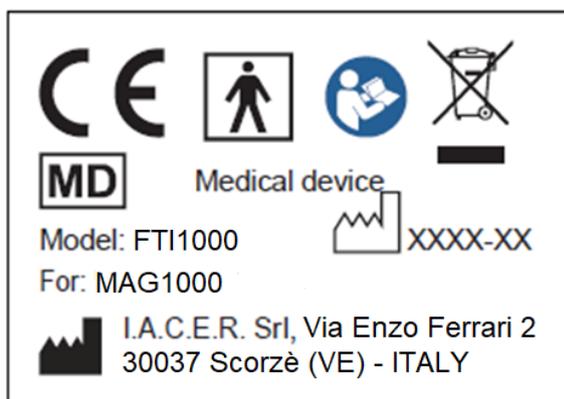

Symboles:

Symbole	Signification
	Logo du fabricant.
	Conforme au règlement (UE) n° 2017/745
	Données du fabricant.

Symbole	Signification
	Date de fabrication (AAAA-MM).
	Dispositif médical.
	Suivre le mode d'emploi.
	Directive DEEE pour l'élimination des déchets électroniques.
	Partie appliquée type BF.

Transport et stockage

Aucune mesure particulière n'est à prendre pendant le transport. En ce qui concerne le stockage, l'appareil est protégé jusqu'aux conditions environnementales suivantes :

température ambiante de +5 à +40 °C

humidité relative de 30 à 80%

Modalités d'utilisation

Mode d'emploi de FTI1000

Respectez les consignes de la notice d'utilisation fournie avec votre appareil.

Respectez les avertissements donnés dans les notices d'utilisation du produit MAG1000.

Entretien de FTI1000

Nettoyage de FTI1000

Pour le nettoyage de FTI1000 , il est recommandé de débrancher l'applicateur du dispositif avant d'effectuer toute opération. Nettoyez le tissu avec un chiffon imbibé dans une solution d'eau et d'alcool (20% de solution) et attendez qu'il sèche complètement avant de réutiliser l'applicateur pour une séance thérapeutique.

Informations pour l'élimination



Le produit est soumis à la norme DEEE (présence sur l'étiquette du symbole ) en matière de tri sélectif : pour l'élimination du produit, utiliser les lieux équipés pour la collecte de matériel électronique en contactant les autorités compétentes locales ou directement le fabricant.

Maintenance et assistance

Aucun entretien particulier n'est requis. Contactez le fabricant pour la vérification biannuelle du fonctionnement du dispositif.

Le fabricant a l'exclusivité concernant les interventions d'assistance technique sur l'applicateur FTI1000. Pour toute intervention d'assistance technique, s'adresser à

I.A.C.E.R. S.r.l.

Via Enzo Ferrari, 2 • 30037 Scorzè (VE)

Tel. 041.5401356 • Fax 041.5402684

Garantie

FTI1000 est couvert par une garantie de 2 ans à compter de la date d'achat. La garantie est nulle en cas d'altération, de négligence et d'utilisation inappropriée de l'applicateur et en cas d'intervention sur celui-ci par du personnel non autorisé par le fabricant ou le revendeur agréé.

Notification des incidents

Conformément aux dispositions du Règlement (UE) 2017/745, le fabricant attire l'attention de l'utilisateur sur la nécessité de signaler tout incident grave survenu en relation avec le dispositif.

- Cette notification doit être adressée au fabricant du dispositif :

I.A.C.E.R. Srl

Via Enzo Ferrari 2 – 30037

Scorzè (VE) ITALY

Tel. +39 041 5401356 – Fax +39 041 5402684

e-mail: iacer@iacer.it



I.A.C.E.R. S.r.l.

Via Enzo Ferrari 2 - 30037, Scorzè (VE) – Italy

Tel.: (+39) 041 540 13 56 | Email: iacer@iacer.it

www.itechmedicaldivision.com

Share Capital: € 1.000.000 fully paid-up

Tax Code / VAT Number: IT 00185480274

Certified email: iacer@pec.it | SDI: SUBM70N