

# MANUAL DE USO

---

*MNPG386-03 Edición 04/07/2022*

*TAP HF*

*I.A.C.E.R. Srl*

*[www.itechmedicaldivision.com](http://www.itechmedicaldivision.com)*

### **Introducción**

El dispositivo **TAP HF** es una alfombra con dos antenas radiantes para magnetoterapia de alta frecuencia.

Está diseñado para tratar el área espinal colocándolo en el respaldo de una silla o sillón.

El dispositivo está clasificado como clase I, de acuerdo con la regla 1 (4.1) prevista en el anexo VIII del Reglamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo y del Consejo del 5 de abril de 2017 sobre productos sanitarios.

UDI-DI básico: 8019781PEMFHFTAPPE

UDI-DI: 08019781113412

### Información técnica

#### **Características técnicas:**

- Tamaño del aplicador: 40x40 cm;
- Longitud del cable: 158 cm;
- 2 antenas radiantes;
- 2 cables de conexión;
- compatible exclusivamente con el modelo MAG1000.


### Etiquetado

Etiqueta 1 (detrás del dispositivo)





Etiqueta cable

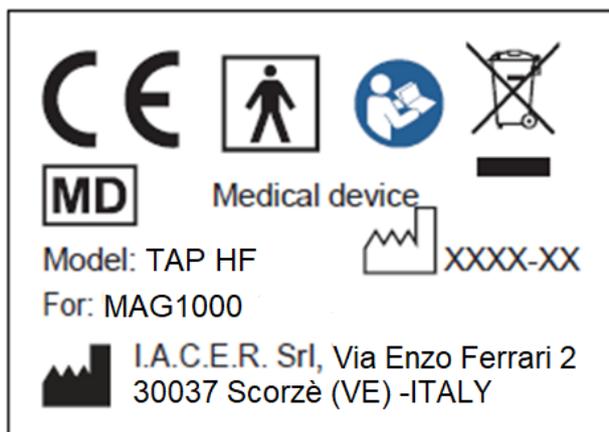

**Simbolos:**

Símbolo	Significado
	Logotipo del fabricante.
	De acuerdo con el Reglamento (UE) núm. 2017/745

Símbolo	Significado
	Datos del Fabricante.
	Fecha de fabricación (AAAA-MM).
	Producto sanitario
	Siga las instrucciones de uso.
	Directiva RAEE para la eliminación de residuos electrónicos.
	Parte aplicada tipo BF.
	Temperaturas permitidas (temperaturas de almacenamiento, en el embalaje).
	Humedad relativa (humedad relativa de almacenamiento, en embalaje).

### Transporte y almacenamiento

No se requieren cuidados particulares durante el transporte. En cuanto al almacenamiento, el equipo está protegido hasta las siguientes condiciones ambientales:

*temperatura ambiente de +5 a + 40 °C*

*humedad relativa del 30 al 80%*

## Modo de empleo

### **Instrucciones de uso de TAP HF**

*Siga las instrucciones del Manual de Uso que acompaña al dispositivo.*

*Siga las advertencias expuestas en los manuales de uso del producto MAG1000.*

## Cuidado de FTI1000

### **Limpieza de TAP HF**

*Para la limpieza de TAP HF se recomienda desconectar el aplicador del dispositivo antes de realizar cualquier operación. Limpie la tela con un paño humedecido con una solución de agua y alcohol (solución al 20%) y espere que se seque por completo antes de volver a utilizar el aplicador para una sesión terapéutica.*

### **Información para la eliminación**



*El producto está sujeto a la normativa RAEE (presente en la etiqueta con el símbolo ) sobre recogida selectiva: para desechar el producto, use áreas especiales equipadas para la recogida de material electrónico contactando con las autoridades competentes de su país o directamente con el fabricante.*

### **Mantenimiento y asistencia**

*El dispositivo no requiere ningún mantenimiento ordinario particular. Póngase en contacto con el fabricante para que se compruebe la funcionalidad del dispositivo cada dos años. El fabricante es el agente exclusivo para intervenciones de asistencia técnica en el aplicador TAP HF. Para cualquier intervención de asistencia técnica, comuníquese con:*

**I.A.C.E.R. S.r.l.**

Via Enzo Ferrari, 2 • 30037 Scorzè (VE)

Tel. 041.5401356 • Fax 041.5402684

## **Garantía**

*TAP HF está cubierto por una garantía de 2 años a partir de la fecha de compra. La garantía queda anulada en caso de manipulación, falta de cuidado y uso inadecuado del aplicador, y en caso de intervención en el mismo por parte de personal no autorizado por el fabricante o por el distribuidor autorizado.*

## **Notificación de incidentes**

*De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2017/745, el fabricante señalará al usuario la necesidad de notificar cualquier incidente grave que se haya producido en relación con el producto.*

- *La notificación deberá dirigirse al fabricante del producto:*

**I.A.C.E.R. Srl**  
Via Enzo Ferrari 2 – 30037  
Scorzè (VE) ITALY  
Tel. +39 041 5401356 – Fax +39 041 5402684  
e-mail: [iacer@iacer.it](mailto:iacer@iacer.it)





**I.A.C.E.R. S.r.l.**

Via Enzo Ferrari 2 - 30037, Scorzè (VE) – Italy

Tel.: (+39) 041 540 13 56 | Email: [iacer@iacer.it](mailto:iacer@iacer.it)

[www.itechmedicaldivision.com](http://www.itechmedicaldivision.com)

Share Capital: € 1.000.000 fully paid-up

Tax Code / VAT Number: IT 00185480274

Certified email: [iacer@pec.it](mailto:iacer@pec.it) | SDI: SUBM70N