

MANUAL DE USO

MNPG367-00 Edición 25/08/21

CV2S2000

Aplicador profesional con par de solenoides

I.A.C.E.R. Srl

www.itechmedicaldivision.com

Introducción

El dispositivo **CV2S2000** es un aplicador profesional con dos solenoides para magnetoterapia de baja frecuencia.

Se adapta fácilmente a cualquier zona del cuerpo gracias a la presencia del elástico terapéutico.

El dispositivo está clasificado como clase I, de acuerdo con la regla 1 (4.1) prevista en el anexo VIII del Reglamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo y del Consejo del 5 de abril de 2017 sobre productos sanitarios.

UDI-DI básico: 8019781PEMFLFAPPP8


UDI-DI: (01)08019781472076

Información técnica

Características técnicas:

- Tamaño del aplicador: diámetro 11 cm + elástico de 115 cm;
- Longitud del cable: 184 cm;
- 2 solenoides profesionales;
- 1 cable de conexión;
- Compatible con los modelos de la serie MAG2000 y LaMagneto.

Etiquetado


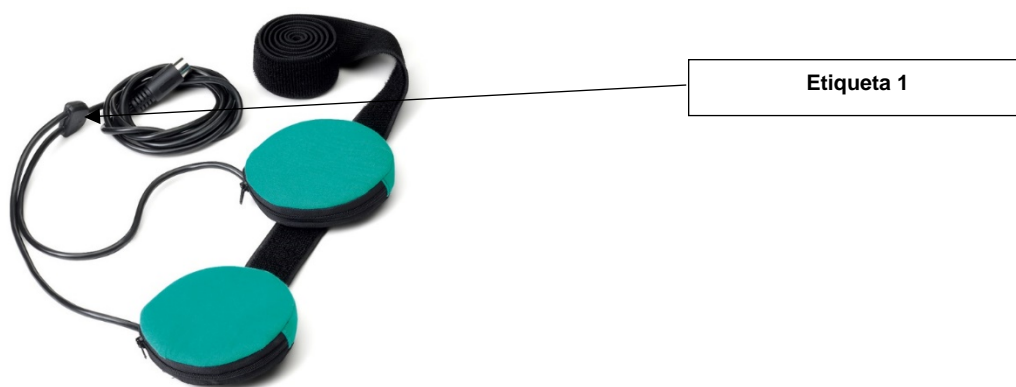


Etiqueta 1







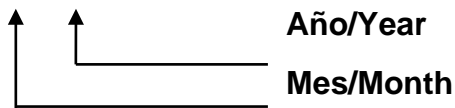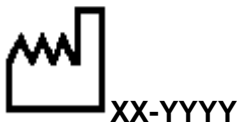


29x18.7mm

Etiqueta 2 – (Etiqueta cable)



Símbolos:

Símbolo	Significado
	Logotipo del fabricante.
	De acuerdo con el Reglamento (UE) núm. 2017/745
	Datos del Fabricante.

Símbolo	Significado
	Fecha de fabricación (MM-AAAA).
	Siga las instrucciones de uso.
	Producto sanitario.
	Directiva RAEE para la eliminación de residuos electrónicos.
	Parte aplicada tipo BF.
	Temperaturas permitidas (temperaturas de almacenamiento, en el embalaje).
	Humedad relativa (humedad relativa de almacenamiento, en embalaje).

Transporte y almacenamiento

No se requieren cuidados particulares durante el transporte. En cuanto al almacenamiento, el equipo está protegido hasta las siguientes condiciones ambientales:

temperatura ambiente de +5 a + 40 °C

humedad relativa del 15 al 93%

Modo de empleo

Instrucciones de uso de CV2S2000

Siga las instrucciones del Manual de Uso que acompaña al dispositivo.


Siga las advertencias indicadas en los manuales de uso de los productos de la familia MAG2000 o la familia LaMagneto.

Limpieza de CV2S2000

Para limpiar el CV2S2000 se recomienda desconectar el aplicador profesional con dos solenoides del dispositivo antes de realizar cualquier operación. Limpie la tela con un paño humedecido simplemente con agua y jabón neutro y espere que se seque por completo antes de volver a utilizar el aplicador con par de solenoides para una sesión terapéutica.

Información para la eliminación



El producto está sujeto a la normativa RAEE (presente en la etiqueta con el símbolo ) sobre recogida selectiva: para desechar el producto, use áreas especiales equipadas para la recogida de material electrónico contactando con las autoridades competentes de su país o directamente con el fabricante.

Mantenimiento y asistencia

El dispositivo no requiere ningún mantenimiento ordinario particular. Póngase en contacto con el fabricante para que se compruebe la funcionalidad del dispositivo cada dos años. El fabricante es el agente exclusivo para intervenciones de asistencia técnica en el aplicador CV2S2000. Para cualquier intervención de asistencia técnica, comuníquese con:

I.A.C.E.R. S.r.l.

Via S. Pertini, 24 / a • 30030 Martellago (VE)

Tel. +39 041.5401356 • Fax +39 041.5402684

Garantía

CV2S2000 está cubierto por una garantía de 2 años a partir de la fecha de compra. La garantía queda anulada en caso de manipulación, falta de cuidado y uso inadecuado del aplicador, y en caso de intervención en el mismo por parte de personal no autorizado por el fabricante o por el distribuidor autorizado.



I.A.C.E.R. Srl

Via S. Pertini 24/A - 30030 Martellago (VE) - Italia / Italy

Tel.: (+39) 041/5401356 - Fax: (+39) 041/5402684

Email: iacer@iacer.it - PEC: iacer@pec.it - Web: www.itechmedicaldivision.com

