

POWER Q-1000 PREMIUM

Power Q-1000 Premium es el nuevo sistema de presoterapia de 4 cámaras de compresión ideal para uso domiciliario con características altamente configurables como:


- ✓ Configuración de la presión para cada cámara de compresión
- ✓ Memorización de los parámetros
- ✓ Configuración de velocidad de flujo de aire (5,7,9,11,13,15,17,19,21 sec)
- ✓ Configuración del intervalo de tiempo que transcurre entre el inflado de una cámara y la siguiente (5,10,15,20,25,30 sec).
- ✓ 6 modos diferentes de inflar las cámaras de aire (modo A1, modo A2, modo B, modo C, modo D, modo E(A1+C)).

Power Q-1000 Premium, debido a su acción de inflado/ desinflado, favorece una correcta circulación venosa en los miembros y aumenta la presión de los tejidos musculares que es indispensable para el tratamiento de los edemas y de otras patologías de miembros inferiores y superiores.



DISPOSITIVO MÉDICO DE CLASE IIa

Power Q-1000 Premium es un dispositivo médico CE1984

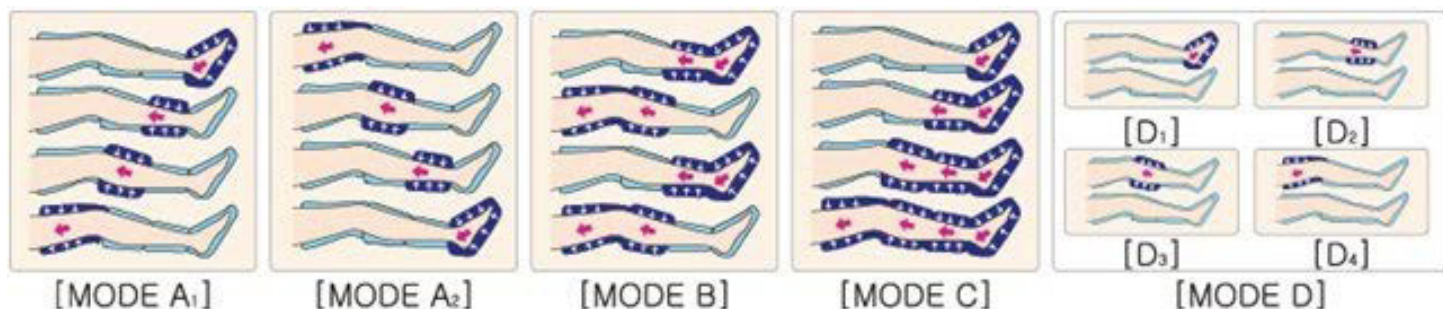

CARACTERÍSTICAS

Alimentación	220-240 V 50/60 Hz
Consumo máximo	53W
Tiempo regulable	5÷99 min.
Presión	0÷240 mmHg ±20%
Pantalla grafica	LCD
Programas	6
Velocidad de flujo de aire	9 niveles
Tiempo seleccionables	6 intervalos
Peso	2 Kg

PRINCIPALES APLICACIONES:

- ✓ LINFEDEMA
- ✓ EMATOMA
- ✓ COMPRESIÓN PASIVA EN PATOLOGÍAS VENOSAS
- ✓ ARTRITIS REUMATOIDE
- ✓ DRENAJE DEL BRAZO DESPUÉS DE INTERVENCIONES DE MASTECTOMÍA
- ✓ TRATAMIENTO DE HEMATOMAS SIGUIENTES A INTERVENCIONES DE CIRUGÍA ESTÉTICA
- ✓ TRATAMIENTO ANTICELULÍTICO EN ESTADIO INICIAL
- ✓ PROFILAXIS POST-OPERATORIA EN INTERVENCIONES DE TROMBOSIS VENOSA

POWER Q-1000 PREMIUM

EQUIPAMIENTO

Power Q-1000 Premium esta previsto en 5 diferentes versiones, según la dotación de base:

POWER Q-1000 Premium TOT

Accesorios incluidos: cuerpo maquina, tubo de empalme con 2 derivaciones, dos perneras , dos plantillas, tubo de empalme a 1 derivación, un funda brazo, faja abdominal, adaptador para la terapia simultánea de las 2 perneras y la faja abdominal.

POWER Q-1000 Premium LEG2-ABD

Accesorios incluidos: cuerpo maquina, tubo de empalme con 2 derivaciones, dos perneras, dos plantillas, tubo de empalme a 1 derivación, faja abdominal, adaptador para la terapia simultánea de las 2 perneras y la faja abdominal.

POWER Q-1000 Premium LEG2

Accesorios incluidos: cuerpo maquina, tubo de empalme con 2 derivaciones, dos perneras, dos plantillas.

POWER Q-1000 Premium LEG1

Accesorios incluidos: cuerpo maquina, un pernera, tubo de empalme a 1 derivación y 1 plantilla.

POWER Q-1000 Premium ARM1

Accesorios incluidos: cuerpo maquina, un funda brazo, tubo de empalme a 1 derivación.

Además están disponibles como accesorios los extensores para perneras para piernas de mayor circunferencia y adaptador para la terapia simultánea de las 2 perneras y la faja abdominal.

MEDIDAS ACCESORIOS

Perneas

- ✓ Longitud:76 cm (de extremo superior a talón)
- ✓ Circunferencia en el muslo:65 cm
- ✓ Circunferencia en el tobillo:38 cm

Brazo

- ✓ Longitud:86 cm
- ✓ Circunferencia en el bíceps:50 cm
- ✓ Circunferencia en la muñeca: 36 cm

Faja abdominal

- ✓ Longitud:136 cm
- ✓ Altura: 46 cm
- ✓ Cintura: 55-110 cm (small) o 80-125 cm (large)



POWER Q-1000 PREMIUM

FABRICANTE

WONJIN MULSAN Co., Ltd.
89 Geomdan-ro , Seo-gu , Incheon, Korea

REPRESENTANTE EC

CMC Medical Devices & Drugs S.L.
C/Horacio Lengo N 18, CP 29006, Málaga, Spain

DISTRIBUIDO POR

I.A.C.E.R Srl Via S.Pertini 24/a - 30030 Martellago (VE) Italy