

POWER Q-6000 PLUS

Appareil professionnel pour la thérapie compressive des membres avec 6 chambres de compression et 2 sorties. Avec POWER Q-6000 Plus, il est possible de personnaliser chaque traitement en fonction des besoins.

POWER Q-6000 Plus favorise la circulation sanguine des membres en répétant continuellement le gonflement et la contraction. De plus, il favorise l'élimination des liquides interstitiels en excès et contribue ainsi au bon fonctionnement du système lymphatique.



CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Alimentation 220-240 V 50/60 Hz
- ✓ Consommation de puissance 80 VA
- ✓ Temps réglable 0÷99 minutes
- ✓ Pression réglable 10÷240 mmHg ±10%
- ✓ 2 sorties (possibilité de connecter jusqu'à 3 accessoires)
- ✓ 5 programmes
- ✓ 8 niveaux de vitesse du flux d'air
- ✓ Écran graphique
- ✓ Poids: 9.5 Kg

DISPOSITIF MÉDICAL DE CLASSE IIa

POWER Q-6000 Plus c'est un dispositif médical CE0476

APPLICATIONS PRINCIPALES

Lymphoedème

Paralysie des membres

Compression passive dans des pathologies veineuses

Arthrite rhumatoïde


Drainage du bras à la suite d'une mastectomie

Traitement des hématomes à la suite d'interventions de chirurgie esthétique

Traitement anti-cellulite au stade initial

Prophylaxie post-opératoire après interventions sur thrombose veineuse

PROGRAMMES

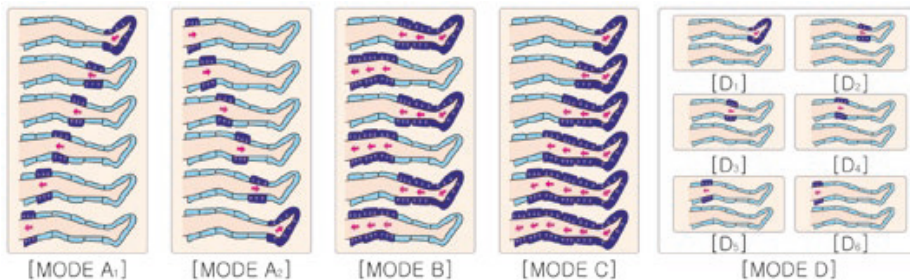

DIMENSIONS

420 x 230 x 310 mm

POWER Q-6000 PLUS

COMMENT ÇA MARCHE

Power Q6000 Plus est le nouveau dispositif professionnel pour la pressothérapie qui favorise une bonne circulation veineuse grâce à son action de pompage.

La pressothérapie facilite la circulation et rend la stase veineuse difficile. La compression externe permet en outre aux fluides interstitiels accumulés en excès de rejoindre le système circulatoire, de sorte qu'ils puissent être correctement et rapidement éliminés, favorisant ainsi le bon fonctionnement du système lymphatique.

Elle est très indiquée soit dans le but esthétique (traitements anti-cellulite) soit dans les problèmes de la circulation sanguine et lymphatique (lymphoedème).

Grace aux 2 sorties et aux tuyaux de raccordement à 1 ou 2 dérivations Power Q6000 Plus permet de connecter simultanément jusqu'à 3 accessoires : cette fonction est très utile pour le traitement de la zone abdominale et des membres inférieures dans la même séance de traitement.

Power Q-6000 Plus est caractérisée par 5 modalités de pompage des chambres d'air, 8 niveaux de vitesse du flux d'air dans les chambres de compression et la possibilité de régler le temps et la pression de la thérapie. De cette façon on peut personnaliser chaque traitement selon le besoin thérapeutique du patient.

Power Q-6000 Plus est fourni avec une double jambière à 6 chambres de compression chacune, 2 semelles pressothérapie, 2 couples de jambières en tissu non-tissé mono-patient, une bande abdominale à 6 chambres de compression, une brassière à 6 chambres de compression et les tuyaux relatifs de raccordement à 1 ou 2 dérivations.

MESURES DES ACCESSOIRES

Jambière

- ✓ Longueur près de 86 cm (d'extrême supérieur au talon)
- ✓ Circonférence cuisse près de 71 cm
- ✓ Circonférence cheville près de 42 cm

Brassière

- ✓ Longueur près de 86 cm
- ✓ Circonférence biceps près de 50 cm
- ✓ Circonférence poignet près de 36 cm

Bande abdominale

- ✓ Longueur près de 136 cm
- ✓ Hauteur près de 46 cm
- ✓ Tour de taille près de 55-110 cm

